




Ultrasonische tandenreiniger met Waterkoeling miDent

Gebruikershandleiding

Inleiding tot het product

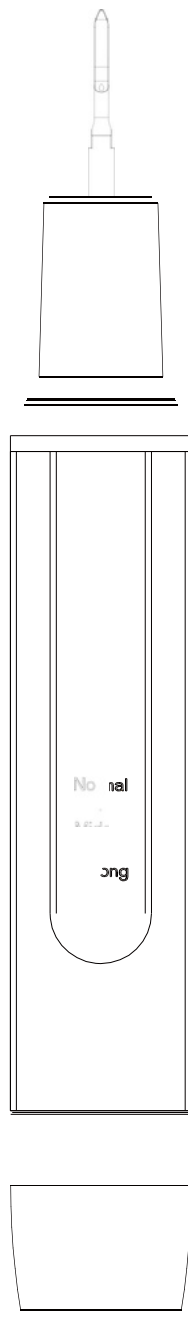

Product en functies

Gezondheid begint bij je tanden. Bedankt dat je onze intelligente WATERSONIC ultrasone tandenborstel met innovatieve waterkoelfunctie hebt aangeschaft. De ultrasone reiniger is ontworpen voor eenvoudig gebruik thuis. WATERSONIC verwijdt effectief tandplak, tandsteen en vlekken van de tanden en voorkomt tandvleesaandoeningen door hard tandsteen te verwijderen. Deze multifunctionele tandplakverwijderaar maakt gebruik van geavanceerde trillingen om pigmentvlekken van de tanden te verwijderen. Het product heeft 4 instelbare standen: zacht, normaal, gemiddeld en sterk. Het product heeft een waterkoelsysteem om de optimale temperatuur te behouden en de tanden tegen oververhitting tijdens het gebruik. Het apparaat heeft ook een oververhittingsbeveiliging met een automatische uitschakeling van 10 minuten die geactiveerd wanneer het LED-lampje uitgeschakeld. De waterstraal met hoge puls verlaagt de piekwerktemperatuur. De ultrasone reiniger is uitgerust met een UV-sterilisator.

Belangrijke veiligheidsinstructies

- Lees deze instructies zorgvuldig door voordat u het product gebruikt en bewaar ze voor toekomstig gebruik.
- de tip tijdens gebruik altijd op het tandoppervlak. Vermijd onnodig contact van de tip met zachte weefsels zoals tandvlees, slijmvliezen of huid.
- Je voelt de trillingen alleen wanneer de borstel in contact met de tand. De reiniger schakelt automatisch uit wanneer deze het tandvlees raakt.
- De tip mag tijdens het reinigen de keramische prothese, de vulling of een tandvulling niet aanraken. De tip kan beschadigd . Gebruik het apparaat alleen volgens de in deze gebruiksaanwijzing beschreven methode.
- De metalen kop van de tandenreiniger is vervangbaar.
- Houd de tandenborstel uit de buurt van de ogen.
- Stop met het gebruik van het apparaat in het geval van een storing.
- Dit product is geen speelgoed. Laat uw kinderen het niet gebruiken.
- Niet geschikt voor patiënten met pacemakers.
- Patiënten met hartaandoeningen, zwangere vrouwen en kinderen moeten voorzichtig zijn.
- het product niet aan direct zonlicht, maar bewaar het in een donkere ruimte bij 0°C tot 40°C.
- Demonteer het product niet zelf.

Het functionele principe van het product

Deze reiniger werkt volgens het principe dat elektrische energie wordt omgezet in ultrasone trillingsenergie. Druk op de aan/uit-knop om het apparaat in te schakelen, het vermogen met de modusknoppen en begin met het reinigen van de gewenste gebieden op het gebit. De hoge vibratie wordt gebruikt om tandsteen af te breken, hardnekkige verkleuringen te verwijderen en tandplak te verwijderen. Gebruik een waterstraal de punt tijdens het reinigen.

Houdt het volgende in de gaten:

- 1 Raadpleeg voor gebruik je tandarts als je hebt van tandvleesaandoeningen.
 - . Bloedingen kunnen zelfs optreden als het tandvlees gezond is. Als je tandvlees blijft bloeden, wat veroorzaakt kan worden door
- 2 tandvleesaandoeningen zoals parodontitis, stop dan met het gebruik van het product en raadpleeg je tandarts.
4. Laat de werkpunt niet te lang op het tandoppervlak liggen tijdens het
- 3 poetsen.
5. Wanneer het apparaat is ingeschakeld, komt geen geluid uit de tip. Je hoort het ultrageluid alleen wanneer het in contact komt met de tand.
6. Niet onderdompelen in water of vloeistof.
7. Houd het apparaat schoon voor en na gebruik.
8. De werkpunt moet stevig vastzitten tijdens het gebruik.
9. De werkpunt mag niet gebogen of geslepen worden.
10. Sla of kras niet op het handvat.
11. Droog het apparaat na gebruik af en bewaar het in een koele, droge omgeving.
12. Trek niet aan het netsnoer tijdens het gebruik van het apparaat te voorkomen dat de handgreep loskomt van het apparaat.


Onderhoud en reiniging

Niet mengen met giftige, bijtende, ontvlambare of explosieve stoffen. Spoel de mond grondig na elke poetsbeurt. Ontsmet de metalen kop onder stromend water. Veeg de body van de tandenborstel schoon.

Gebruiksaanwijzing

1. Dompel het apparaat niet onder in water of andere vloeistoffen.
2. Houd het apparaat schoon voor en na gebruik.
3. Draai de werkpunt stevig vast tijdens gebruik.
4. Wanneer u het apparaat voor de eerste keer inschakelt, laat u het 2-3 seconden draaien en schakelt u het vervolgens 1 seconde uit.
5. Herhaal dit proces verschillende keren om het hulpstuk in optimale staat .
6. Druk niet op het werkpunt en beweeg er niet mee en sla of kras niet op het handvat.
7. het apparaat na gebruik bewaar het op een koele, droge plaats.
8. Vul de watertank alleen met schoon, niet-gevaarlijk water.


Beschrijving van de producten

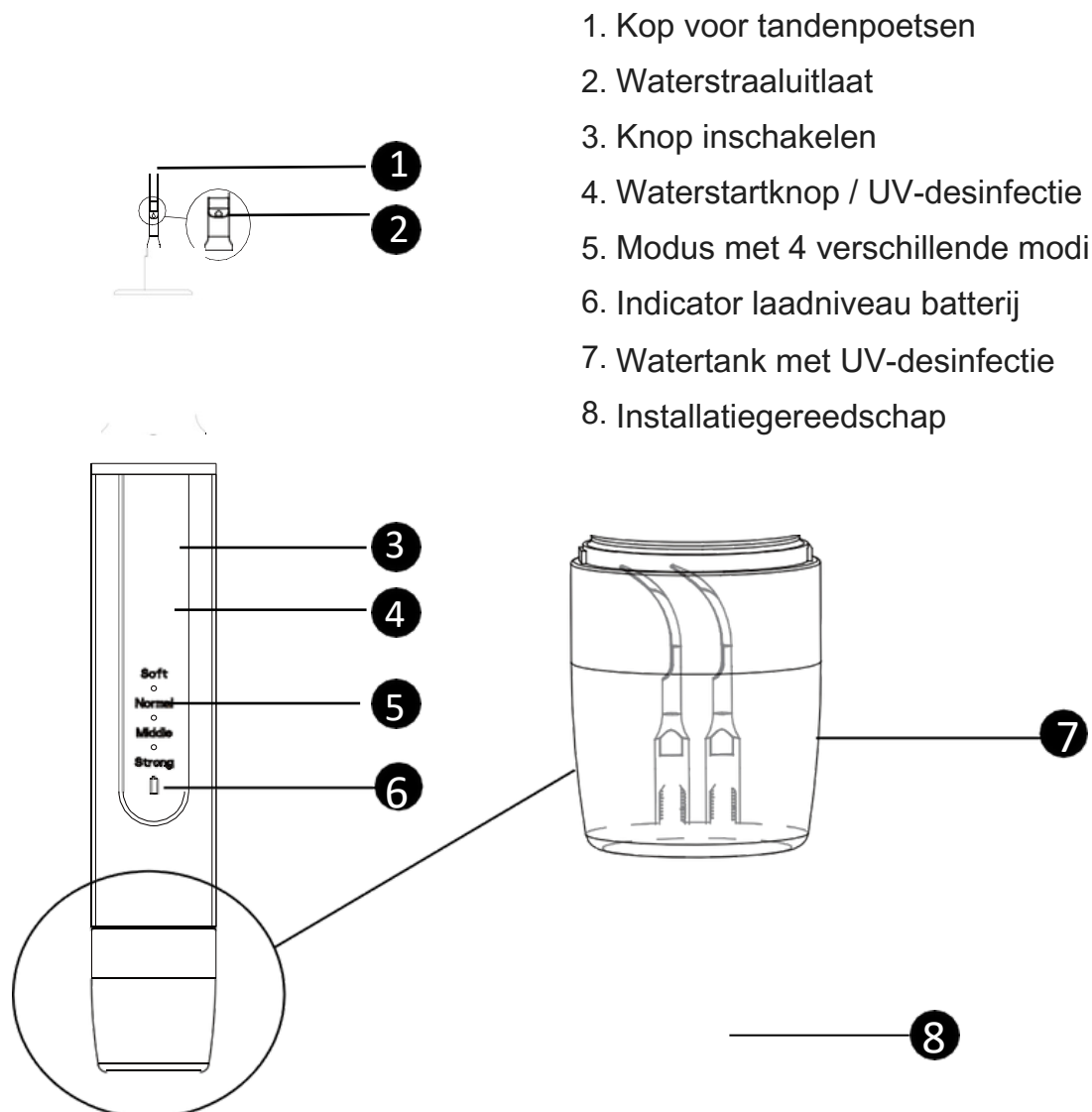


Het apparaat gebruiken

1. Zorg ervoor dat de reiniger volledig is opgeladen voor gebruik. Een volledige lading duurt ongeveer 2 uur.
2. Als u uw tandenborstel voor de eerste keer oplaadt of als u deze lange tijd niet hebt gebruikt (meer dan 3 maanden), kan het langer duren voordat deze volledig is opgeladen.
3. Selecteer een geschikt hulpstuk en plaats het met de klok mee.
4. Zonder scherp te draaien om schade te voorkomen.
6. Vul de bak voor water met water. Zowel de containers aan de onderkant van het apparaat en de container die het werkuiteinde beschermt, kunnen worden gebruikt voor de waterkoelfunctie.
7. Druk op de knop om het apparaat in te schakelen en schakel de SOFT-modus in voor een zachte reiniging en vervolgens de NORMAL-modus voor een normale reiniging.
8. Het indicatorlampje voor de startmodus en het LED-lampje aan de voorkant van de handgreep gaan branden en geven aan dat de machine in werking is.
9. Druk op de watermerkknop om een krachtige waterstraal te starten die de punt en de tanden afkoelt tijdens het reinigen.
10. Plaats het uiteinde van de punt op de tand zodat de beweging van de punt parallel loopt met het tandoppervlak.
11. Voor moeilijk te verwijderen tandsteen kan een hogere vermogensstand in de COMFORT- en STERK-modus nodig om het contact van de punt met het tandoppervlak te behouden tijdens het poetsen.
12. Beweeg de punt langzaam heen en weer en laat het apparaat het werk doen. Gebruik korte en lange bewegingen om het hele tandoppervlak te reinigen.
13. LET OP: Oefen tijdens het tandenpoetsen niet te veel kracht uit op één plek en blijf niet langer dan 5 seconden op één plek.
14. De interne en externe onderdelen van het apparaat kunnen beschadigd raken als het apparaat valt of verkeerd wordt behandeld.
15. Gebruik altijd een apparaat met waterkoeling om oververhitting van de reinigingskop te voorkomen.
16. Gebruik een tandheelkundige spiegel wanneer u aan de binnenkant van de tand werkt. laagspanningsdetectie. Het alarm knippert wanneer de batterijspanning lager dan 3V.
17. Houd de UIT-knop ingedrukt wanneer het apparaat gebruikt en schakel het uit.
18. Het apparaat heeft een vooraf ingestelde automatische uitschakelfunctie na 10 minuten om oververhitting te voorkomen.

Inleiding tot de werktips

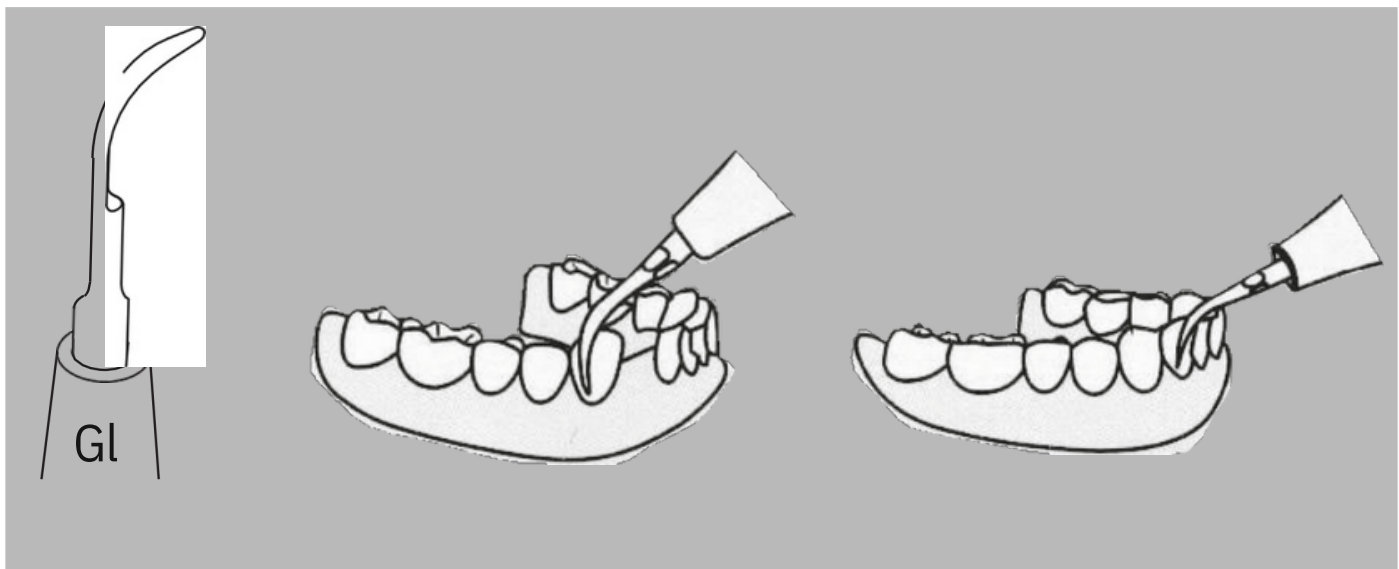

Tip 1 is dun en wordt gebruikt voor scaling en interdentale reiniging.

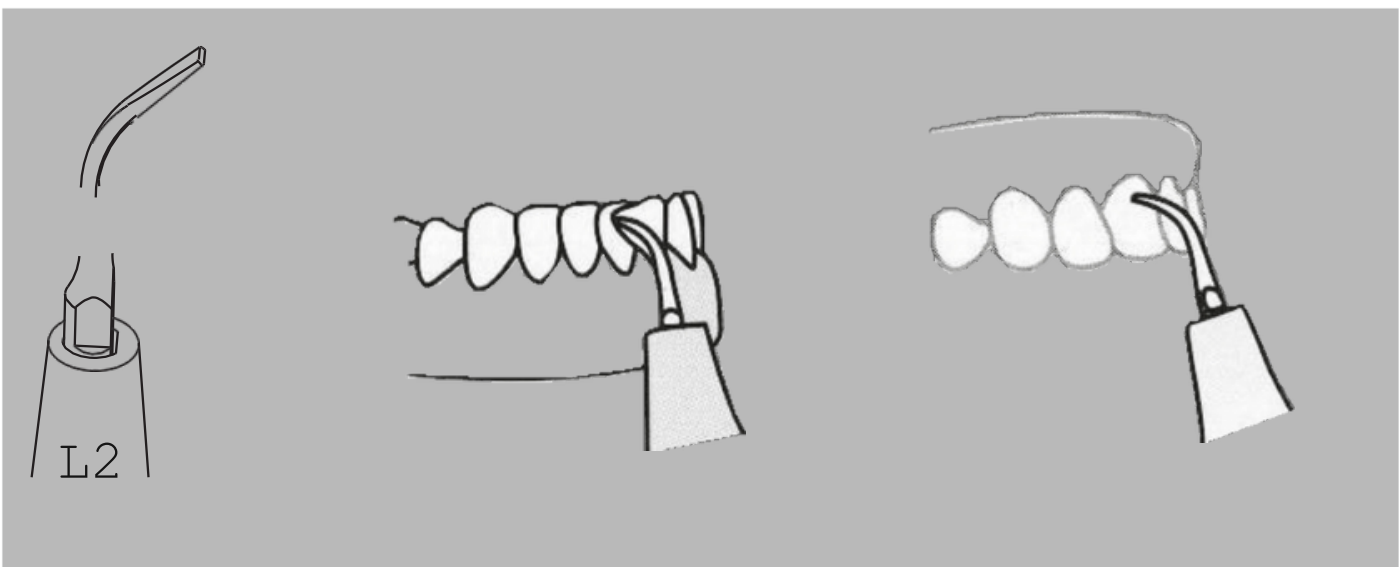


Tip 2 is breder en wordt gebruikt om groot tandsteen en pigment op de tanden te verwijderen.


- Ontsmet de werkpunt met heet water op hoge temperatuur voor gebruik.
- Om kruisbesmetting te voorkomen, mag je de werktip niet met andere mensen delen.
- De frequentie van het instrument verschilt, selecteer de juiste werkmodus.
- Gebruik de werktip op de juiste manier zoals hierboven beschreven.

Gebruik van werkpieken


De werkpunt raakt de tanden voorzichtig verticaal en beweegt zowel op en neer als naar links en rechts. Pas de gebruiksduur van elk onderdeel aan de conditie van de tanden aan.

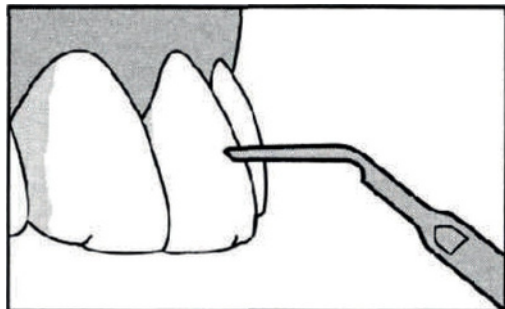


Vuil op het tandoppervlak

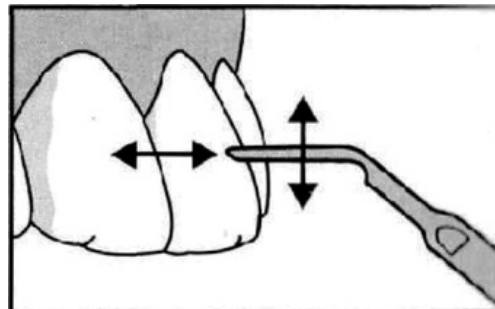




Grens tussen tandvlees en tand

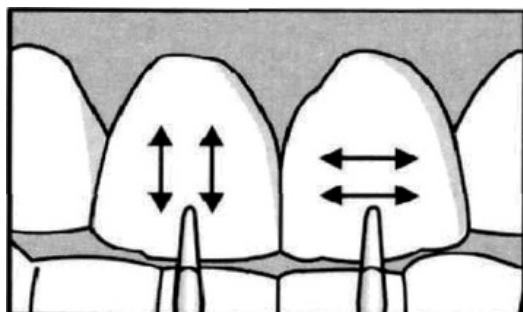


Interdentale ruimte

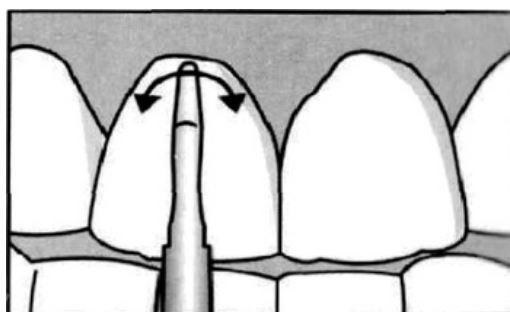

Vuil van ongelijke tanden

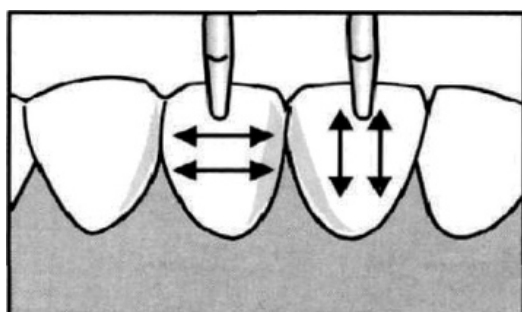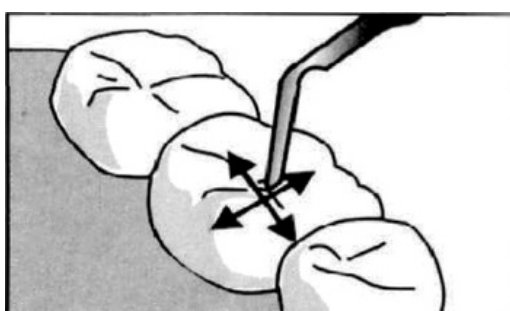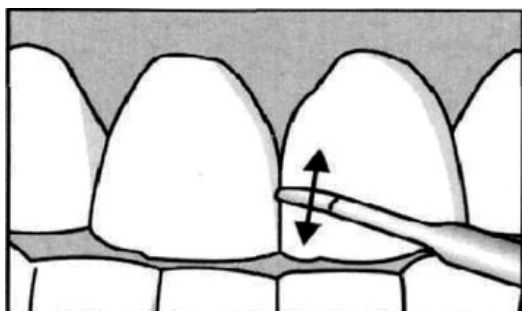

Vuil op de achterkant van de tanden

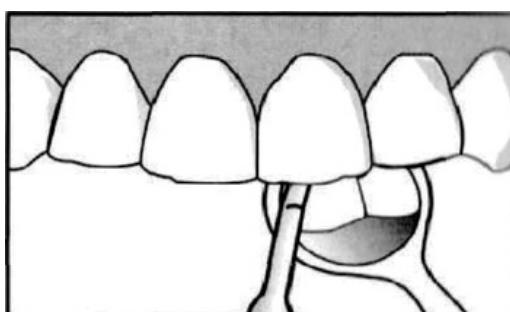


Gebruik het volgende tijdens de behandeling een tandglas op de achterkant van de tand


De werktip wijzigen




De oriëntatie van de werkpunt kan variëren, maar zolang hij er stevig op , kan hij in elke richting worden gebruikt.

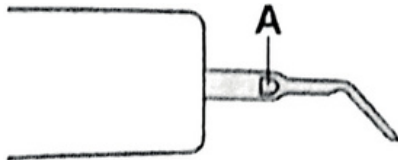

Bevestig positie A

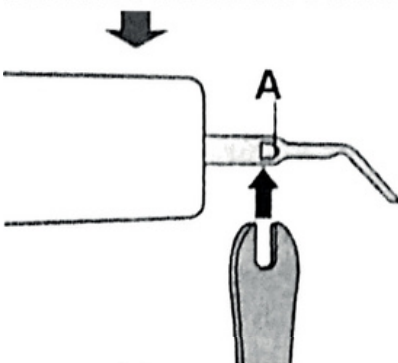


Steek de sleutel in positie A

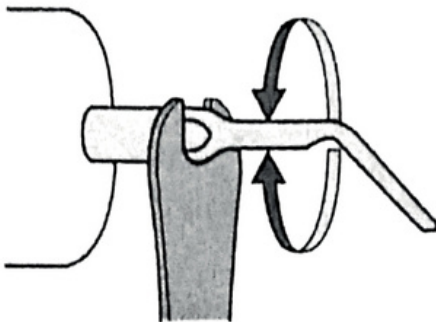

Gebruik een ~~moederkop~~ moederkop linksom te draaien om de werkpunt te sluiten.

en voltooi de demontage.

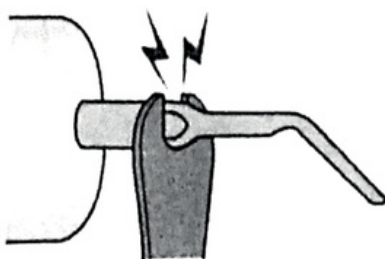


Preventieve maatregel

Monteer niet te strak, want dit kan de interface beschadigen.

Hoe te verzorgen



Gebruik geen verdunners, benzeen en oplosmiddelen, chemicaliën of schuurpoeder.

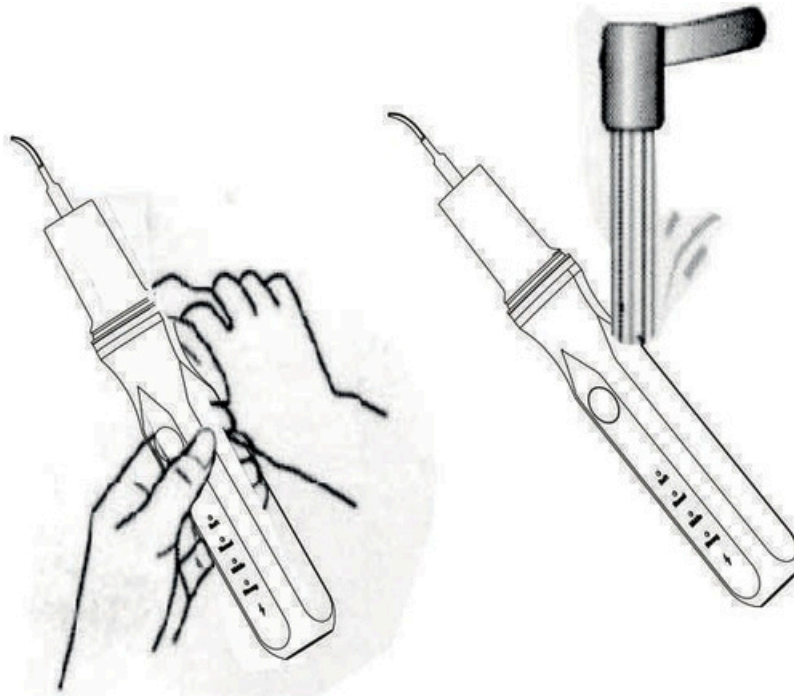

Het hoofdgedeelte kan direct met water gewassen en ~~met~~ ^{op} het hoofdgedeelte kan met een doek worden weggeveegd.

Opmerking

- Raadpleeg een gediplomeerd tandarts of mondhygiënist voordat u onze hulpmiddelen gebruikt. Wij bieden een product aan, geen behandelplan, aanvaarden daarom geen verantwoordelijkheid voor eventuele complicaties. Als u het product zonder professionele begeleiding te gebruiken, doet u dat op eigen risico. Als u ons en wij geven u advies, dit dan niet als vanzelfsprekend aan, aangezien wij niet verantwoordelijk zijn voor het advies dat wij u hebben gegeven.
- Dit product is geen vervanging voor medische hulpmiddelen en heeft geen therapeutisch effect.
- Het product is niet geschikt voor kinderen jonger dan 18 jaar.